Trockenschränke und Exsikkatoren



SICCO Produkt-Guide

Highlights & News



Control Exsikkatoren
ab Seite 2

NEU



Vakuum Exsikkatoren
Seite 6



Zubehör und Ersatzteile
ab Seite 14


EINE MARKE VON BOHLENDER

NEU

SICCO Control-Exsikkatoren
Für eine konstante und kontrollierte Luftfeuchtigkeit



Unsere Control-Exsikkatoren nutzen eine innovative Methode, um die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft auf einen Sollwert von 15 % bis 95 % zu regeln. Die automatische Control-Einheit entzieht dem Innenraum Feuchtigkeit oder fügt diese bei Bedarf aus der Umgebungsluft hinzu.

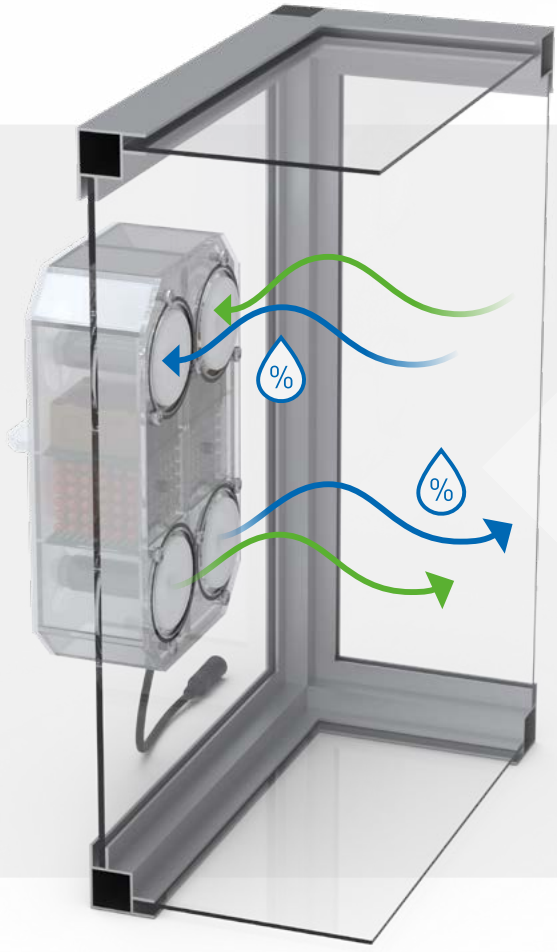

Und so funktioniert es:

Spezielle Trockenperlen (Silicagel) absorbieren Feuchtigkeit aus dem Innenraum und geben sie an die Umgebung ab.

Alternativ können die Perlen auch genutzt werden, um Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft in den Innenraum abzugeben.

Ein kleiner Lüfter und die Erwärmung der Perlen unterstützen den Prozess.

Die kompakte Control-Einheit
auf der Rückseite ist das Herzstück des Systems und regelt den gesamten Feuchtigkeitsprozess vollautomatisch.





Das Touch-Display – Alles auf einen Blick

Das digitale Display ist Ihre Kommandozentrale. Hier stellen Sie den gewünschten Sollwert (von 15 % bis 95 % r.F.) einfach ein. Sie haben jederzeit den aktuellen Ist-Wert sowie die Temperatur auf einen Blick und können den Betriebsstatus sofort erkennen.

Drei Größen. Ein Prinzip.

Alle drei Modelle funktionieren nach dem selben Kontrollprinzip, sind aber für unterschiedliche Größen und Anforderungen ausgelegt. Sie bestehen aus einem stabilen Aluminiumrahmen mit klaren Scheiben aus PMMA (Acrylglas). Die Exsikkatoren sind für den Normaldruck ausgelegt und temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C. (230 V / 50 Hz benötigt).

Die Modelle im Überblick:







Typ	Control-Star Exsikkator	Control-Big Star Exsikkator	Control-Maxi 2 Exsikkator
SICCO Artikel-Nr.:	**V 1677-07**	**V 1679-07**	**V 1682-07**
Außenmaße* B x H x T mm	310 x 525 x 375	560 x 560 x 580	560 x 1150 x 580
Überstand Controleinheit mm	60 hinten	60 hinten	60 hinten
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	260 x 480 x 330	495 x 500 x 540	495 x 500 x 540 pro Kammer
Innenvolumen Liter	50 / nutzbar 40	153 / nutzbar 127	153 / nutzbar 127 pro Kammer
Gewicht kg	7,3	23	36
Max. Nutzlast pro Boden / Gesamtlast kg	10 / 30	30 / 80	30 / 80 pro Kammer
Nutzfläche je Zwischenboden mm	245 x 320	479 x 515	479 x 515
Minimaler Abstand der Zwischenböden mm	11,5	39	39
Zusätzliche Zwischenböden inkl. Führungsschienen	V 1860-68	V 1860-03	V 1860-03
Richtpreis Euro**	3.306,50 €	4.915,40 €	7.949,38 €

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.


Die Kontrollvorteile:

- Entfeuchten & Befeuchten mit nur einem Gerät präzise umzusetzen.
- Präzise Einstellung der relativen Luftfeuchte von 15% bis 95 %
- Keine externe Wasserzugabe oder Entleerung nötig.
- Vollautomatische Regelung dank Steuereinheit.

*** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

SICCO Exsikkatoren
zur Trocknung und Lagerung

SICCO **Star-Exsikkatoren**

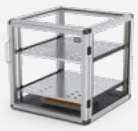Typ	Star	Horizontal-Star	Big-Star	Tower-Star	Maxi 1-Exsikkator	Maxi 2-Exsikkator
						
SICCO Artikel-Nr.:	**V 1871-07**	**V 1899-07**	**V 1896-07**	**V 1938-07**	**V 1852-01**	**V 1853-01**
Scheiben	klar	klar	klar	klar	klar	klar
Eigenschaften	4 Zwischenböden (max. 26 Stück)	breite Form; Tür öffnet nach vorne; 2 Zwischenböden (max. 13 Stück)	2 Zwischenböden (max. 8 Stück)	hohe Form; Tür öffnet nach vorne; 4 Zwischenböden (max. 38 Stück)	eine Tür; 4 Zwischenböden (max. 17 Stück)	zwei Türen; 4 Zwischenböden (max. 8 Stück pro Kammer)
Verwendung bei	Normaldruck	Normaldruck	Normaldruck	Normaldruck	Normaldruck	Normaldruck
Temperaturbeständigkeit °C	-20 bis +70	-20 bis +70	-20 bis +70	-20 bis +70	-20 bis +70	-20 bis +70
Außenmaße* B x H x T in mm	310 x 525 x 375	525 x 340 x 375	560 x 560 x 580	310 x 735 x 375	560 x 1150 x 580	560 x 1150 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm	260 x 480 x 330	480 x 260 x 330	495 x 500 x 540	260 x 690 x 330	495 x 1030 x 540	495 x 500 x 540 pro Kammer
Nutzvolumen Liter, ca.	50 / nutzbar 40	50 / nutzbar 40	153 / nutzbar 127	71 / nutzbar 56	293 / nutzbar 260	153 / nutzbar 127 pro Kammer
Gewicht kg, ca.	7	7	18	8	30	34
Zulässige Gesamtbelastung kg, ca.	30	30	80	40	160	80 pro Kammer
Stand	Gummifüße, stapelbar	Gummifüße, stapelbar	Gummifüße, stapelbar	Gummifüße, stapelbar	Rollen; 2 mit Feststell-bremse	Rollen; 2 mit Feststell-bremse
Trockenmittel enthalten	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Richtpreis Euro**	937,08 €	1.199,37 €	2.132,86 €	1.496,92 €	3.490,05 €	4.489,51 €

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.



Elektronisches **Hygrometer**
Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick

Ausziehbare und höhenverstellbare **Zwischenböden**
Leicht zugänglich und platzsparende Aufbewahrung

Tür mit **Griff**
Sicherer Verschluss durch Magnetleiste

Umlaufende **Gummidichtung**
Verhindert das Eindringen von Luftfeuchtigkeit

Verstärkter **Aluminiumrahmen**
langlebig und optisch ansprechend

Scheiben aus **Acryl- oder Borosilikatglas**
Rundum einsehbar

Bodenwanne für **Trocknungsmittel**
Auch zum Regenerieren im Ofen verwendbar

Rutschfeste **Gummifüße**
Für einen sicheren Stand

** *Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

SICCO **Exsikkatoren Protect**

Typ	Star	Big-Star
SICCO Artikel-Nr.:	**V 1879-07**	**V 1926-07**
Scheiben	orange	orange
Material	PMMA	PMMA
Temperaturbeständigkeit °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Verwendung	Normaldruck	Normaldruck
Stand	Gummifüße	Gummifüße
Außenmaße* B x H x T mm	310 x 525 x 375	560 x 560 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	260 x 480 x 330	495 x 500 x 540
Innenvolumen Liter	50 / nutzbar 40	153 / nutzbar 127
Gewicht kg	7	18
Max. Nutzlast pro Boden / Gesamtlast kg	10 / 30	30 / 80
Nutzfläche je Zwischenboden mm	245 x 320	479 x 515
Minimaler Abstand der Zwischenböden mm	11,5	39
Zusätzliche Zwischenböden	V 1860-68	V 1860-03
Richtpreis Euro**	**1.250,58 €**	**2.304,37 €**

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.

SICCO **Exsikkatoren Black**

Typ	Star	Big-Star
SICCO Artikel-Nr.:	**V1891-07**	**V1939-07**
Scheiben	schwarz	schwarz
Material	PMMA	PMMA
Temperaturbeständigkeit °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Verwendung	Normaldruck	Normaldruck
Stand	Gummifüße	Gummifüße
Außenmaße* B x H x T mm	310 x 525 x 375	560 x 560 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	260 x 480 x 330	495 x 500 x 540
Innenvolumen Liter	50 / nutzbar 40	153 / nutzbar 127
Gewicht kg	7	18
Max. Nutzlast pro Boden / Gesamtlast kg	10 / 30	30 / 80
Nutzfläche je Zwischenboden mm	245 x 320	479 x 515
Minimaler Abstand der Zwischenböden mm	11,5	39
Zusätzliche Zwischenböden	V 1860-68	V 1860-03
Richtpreis Euro**	**1.174,86 €**	**2.308,43 €**

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.

Weitere Modelle
auf unserer Website



SICCO
Protect Exsikkatoren
für lichtintensive Produkte

- orangefarbene Scheiben hemmen den Lichteinfall
- besonders zur Lagerung lichtempfindlicher Substanzen


SICCO
Black Exsikkatoren
zur lichtgeschützten Lagerung

- schwarze, absolut lichtundurchlässige Scheiben
- zur Lagerung unter Ausschluss von Licht und UV-Strahlung

*** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

SICCO **Vakuum-Exsikkatoren**

Scheiben:	Material:	Temperaturbeständigkeit:	Verwendung:	Stand:
glasklar	**PMMA**	**-20 °C bis +70 °C**	**Vakuum bis 0,2 mbar**	**Gummifüße**

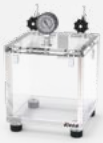
Typ	Vakuum 1	Vakuum 2	Vakuum 3	Vakuum Toplader
	BEST SELLER 			
SICCO Artikel-Nr.:	**V 1880-04**	**V 1880-08**	**V 1880-12**	**V 1882-02**
Außenmaße* B x H x T mm	300 x 340 x 300	300 x 440 x 300	315 x 550 x 310	250 x 250 x 250
Überstand Ventile + Vakuummeter mm	100	100	100	
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	260 x 260 x 260	260 x 360 x 260	265 x 460 x 260	210 x 210 x 210
Innenvolumen Liter	18	25	32	9
Gewicht kg	15	18	27	9
Max. Nutzlast pro Boden / Gesamtlast kg	9 / 30	9 / 40	9 / 50	30
Nutzfläche je Zwischenboden mm	260 x 230	260 x 230	260 x 230	210 x 210
Minimaler Abstand der Zwischenböden mm	60	60	55	
Optionale Zwischenböden	V 1860-30	V 1860-30	V 1860-30	
Richtpreis Euro**	5.802,00 €	6.491,02 €	7.895,33 €	4.203,97 €

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.

Vorsicht, richtiges Entlüften!

Oftmals wird der Fehler begangen, den Verschluss nach dem Evakuieren erneut anzuziehen, um sie scheinbar perfekt zu verschließen. Beim Entlüften des Exsikkators ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Hebel vor dem Entlüften wieder in ihre ursprüngliche Position gebracht werden, da sie unter Druck brechen können.

Technische Daten	Vakuummeter
Ausführung	EN 837-1
Nenngröße mm	63
Genauigkeit	Klasse 2,5 (±2,5 %)
Anzeigebereich in bar	-1,0 bis 0
Skalenteilung	0,05

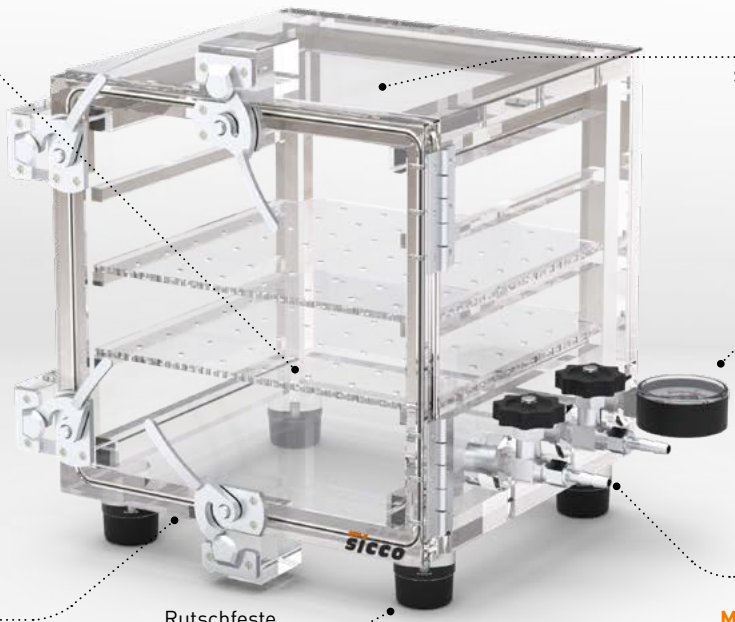

Ausziehbare **Zwischenböden**
leicht zugänglich und platzsparende Aufbewahrung

Scheiben aus **Plexiglas**
Starke Wandung für hohe Druckbeständigkeit

Vakuummeter **-1,0-0 bar**
Vielseitige und präzise Messung im Labor

Umlaufende **Silikondichtung**
Konstant niedrige Luftfeuchtigkeit

Rutschfeste **Gummifüße**
für einen sicheren Stand

Nadelventile **Mit Oliven-Außen Ø 9,0 mm**

*** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

Eigene Fertigung
für erstklassige Qualität

Wer sichere Ergebnisse will, braucht fehlerfreies Equipment. Diesem Anspruch werden wir gerecht: Von der Herstellung der Baugruppen bis zur Fertigung des Endproduktes in unserem Haus sichern wir über alle Prozessschritte hinweg höchste Qualitätsstandards. Alle Produkte sind von unseren Spezialisten konstruiert, immer wieder erprobt und bis ins Detail optimiert. Erst wenn sie zufrieden sind, fertigen wir in Serie. Wir sind flexibel und nah an der Praxis. Deshalb bieten wir ein so umfangreiches Portfolio, haben ein gut bestücktes Lager und entwickeln bei Bedarf schnell starke Neuheiten, Modifikationen oder Maßarbeiten.



Flexible Fertigung mit modernem Maschinenpark

Dank unserer vielfältigen und modernen Fräsmaschinen können wir die Produktion unserer Profilteile umgehend durchführen, was maximale Flexibilität bietet.



Bettfräsmaschine

Die Bettfräsmaschine kommt bei der Herstellung von Eckprofilen zum Einsatz und zeigt ihre Stärken besonders bei Maßanfertigungen. Nur minimale programmtechnische Eingriffe sind erforderlich, um Ihre individuellen Bedürfnisse präzise umzusetzen.



Exakte Zuschnitte für Ihre Maßanfertigung

Mit unserer modernen Kreissäge steigern wir nicht nur die Produktivität, sondern garantieren auch höchste Präzision, insbesondere beim exakten Zuschnitt von Acrylglasscheiben.

SICCO Handschuhboxen

Unsere SICCO Handschuhboxen sind die ideale Lösung für Umgebungen, in denen empfindliche oder gesundheitsgefährdende Stoffgemische bearbeitet oder verarbeitet werden müssen. Der herausragende Vorteil liegt in der großzügigen Arbeitsraumtüre, die es ermöglicht, vor Beginn der Arbeiten mühelos sämtliche benötigten Geräte wie Waagen, Spritzen, Pipetten und mehr einzubringen und zu installieren. Diese nutzerfreundliche Funktionalität erleichtert den Arbeitsablauf erheblich und optimiert die Effizienz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen.



Handschuhboxen

Mit einem Rahmen aus Aluminiumprofilen und Eckverbindern aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind SICCO Handschuhboxen besonders stabil - ideal für eine lange Nutzungsdauer.





SICCO Handschuhbox

Scheiben:	Material:	Temperaturbeständigkeit:	Verwendung:	Stand:
klar	**PMMA**	**-20 °C bis +70 °C**	**Normaldruck**	**Gummifüße**

Produktbeschreibung:

Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Arbeitsraum inklusive zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (1x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 1x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).



Artikel-Nr.:	**V 1984-08**
Außenmaße* B x H x T mm	890 x 690 x 590
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	850 x 650 x 550
Innenvolumen Liter	287
Gewicht kg, ca.	14
Nutzlast bei flächiger Belastung kg, ca.	40
Eingriffsöffnung mm	Ø 188
Mittenabstand Eingriffsöffnung mm	390
Klappdeckelöffnung B x H mm	850 x 430
Begasungsanschluss – Durchgang mm	Ø 9
Bohrungen Scheibe mm	Ø 74,5
Richtpreis Euro**	**3.951,71 €**

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.

*** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

SICCO **Handschuhbox mit Schleuse**

Scheiben:	Material:	Temperaturbeständigkeit:	Verwendung:	Stand:
klar	**PMMA**	**-20 °C bis +70 °C**	**Normaldruck**	**Gummifüße**

BEST SELLER

Produktbeschreibung:

Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

Artikel-Nr.:	**V 1982-08**
Außenmaße gesamt* B x H x T mm	1180 x 690 x 590
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	850 x 650 x 550
Innenvolumen Liter	290
Gewicht gesamt kg, ca.	20
Nutzlast bei flächiger Belastung kg, ca.	40
Eingriffsöffnung mm	Ø 188
Mittenabstand Eingriffsöffnung mm	390
Klappdeckelöffnung B x H mm	850 x 430
Begasungsanschluss – Durchgang mm	Ø 9
Bohrungen Scheibe mm	Ø 74,5
Richtpreis Euro**	5.649,99 €

Details Schleuse:	
Außenmaße* B x H x T mm	290 x 325 x 260
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	250 x 270 x 220
Innenvolumen Liter, ca.	24
Max. Nutzhöhe mm	270 » 1000 ml Laborflasche mit GL 45 Gewinde
Max. Nutzbreite mm	250
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg	3

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.












SICCO Kabeldurchführung

Nutzen Sie die Vorteile unserer innovativen Lösung: Mit der von SICCO eigens entwickelten Kabeldurchführung für Handschuhboxen können Sie jetzt elektronische Geräte sicher und zuverlässig im Inneren der Handschuhbox betreiben.

*** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

SICCO Handschuhboxen bieten sicheres Arbeiten mit empfindlichen Stoffgemischen in isolierter Atmosphäre. Robuste Naturkautschukhandschuhe gewährleisten Beweglichkeit und sicheres Handling. Begasungsanschlüsse ermöglichen Arbeiten in stickstoff- oder edelgasüberlagerter Umgebung. Die Schleuse ermöglicht bequemes Beladen der Handschuhbox.

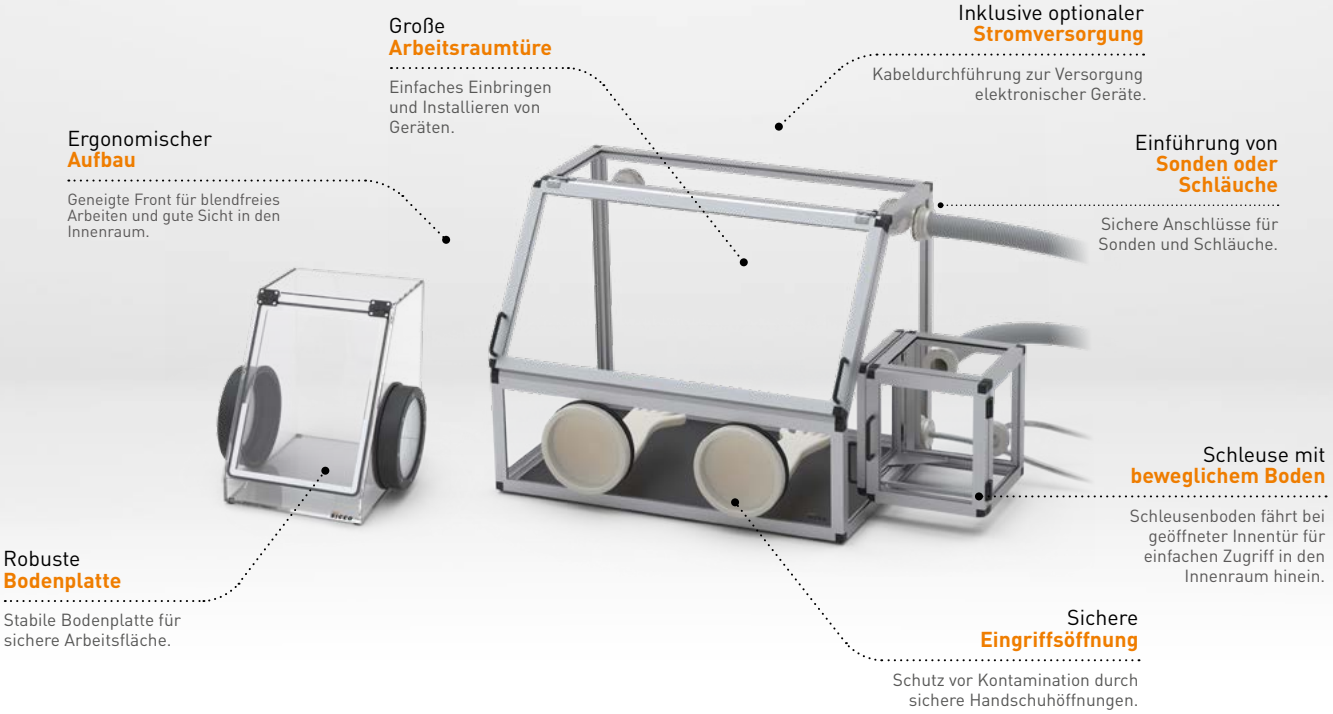

SICCO Mini-Handschuhbox

Scheiben:	Material:	Temperaturbeständigkeit:	Verwendung:	Stand:
klar	**PMMA**	**-20 °C bis +70 °C**	**Normaldruck**	**Gummifüße**

BEST SELLER

Produktbeschreibung:

Scheiben und Boden aus Acrylglas, Eingriffsöffnungen seitlich mit Iris-Port-Eingriffen (1x rechts, 1x links).

Artikel-Nr.	V 1705-08
Außenmaße gesamt* B x H x T mm	300 x 400 x 400
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	290 x 390 x 390
Innenvolumen Liter	33
Gewicht gesamt kg, ca.	5,7
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg	10
Eingriffsöffnung mm	Ø 170
Richtpreis Euro**	1.834,62 €

Produktanwendung:

Zum einfachen Handling kleiner Produktmengen in abgeschlossenem Arbeitsraum. Leicht transportabel durch geringes Eigengewicht. Die Iris-Port-Eingriffe können einfach gegen Handschuhe für Eingriffsöffnungen mit Ø 190 mm für dichten Verschluss ausgetauscht werden.

*Außenmaße sind Rahmenmaße ohne Anbauteile, in der Höhe ab Standfläche gemessen.







*** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

b.safe

Durchdachte Sicherheitslösungen für HPLC.



Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.bsafe.de oder **+49 (0) 93 46-92 86-0**

Eine Marke von Bohlender

BOLA

Mehr Leistung fürs Labor.



Profi-Laborbedarf für **Chemie, Pharma, Industrie und Forschung**

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.bola.de oder **+49 (0) 93 46-92 86-0**

Eine Marke von BOHLENDER

SICCO Iris-Port-Eingriffe

Für einen schnellen Zugang zum Arbeitsraum und für Anwendungen, die in der Handschuhbox keine Schutzgasatmosphäre erfordern, sind SICCO Iris-Port-Eingriffe eine echte Alternative zu montierten Arbeitshandschuhen. Die Eingriffe bestehen aus einem stabilen Ring aus Polyethylen, in dem zwei kreuzförmig geschlitzte Silikonscheiben befestigt sind. Die Silikonscheiben überlappen sich für leichten Zugang und minimierten Luftaustausch bei Nichtgebrauch.

Die Montage der Iris-Port Eingriffe

Zuerst werden die Handschuhe vom Haltering abgezogen. Danach setzen Sie den weißen Silikonring in die Nut der Eingriffsöffnung. Zum Schluss wird der Iris-Port durch gleichzeitiges Drehen und Drücken befestigt.





Vorteil

Sie haben ohne mühsames An- und Abstreifen der Arbeitshandschuhe direkten Zugang zum Arbeitsraum.



SICCO Verschlussdeckel

Ohne montierte Arbeitshandschuhe oder Iris-Ports bleiben die Eingriffsöffnungen der SICCO Handschuhbox offen, was zu potenziellen Verunreinigungen im Arbeitsraum oder dem Austritt von gefährlichen Stäuben und Partikeln führen kann. Der SICCO Verschlussdeckel bietet eine einfache Lösung: Er wird über die Öffnungen geschraubt, mit einer Silikonschnur gesichert, ohne jedoch gasdicht abzuschließen.





Vorteil

Einfache Montage zur Vermeidung von Kontamination des Arbeitsraums und der Umgebung.





Die Montage der Verschlussdeckel

Die Montage des Verschlussdeckels ist einfach: Entfernen Sie zunächst die Iris-Port-Eingriffe. Der Silikonring kann dabei an Ort und Stelle bleiben. Anschließend setzen Sie den Verschlussdeckel durch Drehen und Drücken auf.

SICCO passende Zubehör und Ersatzteile

Zubehör für Trocknung / alle Star / Big Star und Maxi-Exsikkatoren

Artikelbeschreibung:		Material / Besonderheiten:	Gewicht:	passend für Exsikkatoren:	Artikel-Nr.:	*Richtpreise Euro
Silicagel mit Farbindikator von orange nach dunkelbraun bis schwarz, regenerierbar (enthält kein Kobalt-II-Chlorid)		Körnung 2,0–5,0 mm, Verlust beim Trocknen <= 4 %	360 g 720 g	Alle Star-, Big-Star, Maxi-Exsikkatoren	V 1895-04 V 1895-08	31,78 € 50,35 €
Silicagel mit Farbindikator von orange nach dunkelbraun bis schwarz, regenerierbar (enthält kein Kobalt-II-Chlorid)		Körnung 2,0–5,0 mm, Verlust beim Trocknen <= 4 %	8.000 g	Alle Star-, Big-Star, Maxi-Exsikkatoren	V 1895-12	252,28 €



SICCO Einlegebögen für Exsikkatoren

Artikelbeschreibung:	B x H x T mm:	Material / Besonderheiten:	Gewicht inkl. Schienen:	Volumen / max. Nutzlast:	passend für Exsikkatoren:	Artikel-Nr.:	*Richtpreise Euro
Einlegeboden inkl. 2 Führungsschienen	258 x 4 x 320	Polycarbonat, transparent Führungsschienen aus Polyamid	ca. 420 g	10 kg	Star - V 1871-07 Protect Star - V 1879-07 Black-Star - V 1891-07	V 1860-68	31,45 €
Einlegeboden	258 x 5,0 x 250	PMMA, transparent	ca . 380 g	9 kg	Alle Vakuum Exsikkatoren	V 1860-30	114,12 €
Einlegeboden mit 36 Bohrungen Ø 20 mm inkl. 2 Führungsschienen	495 x 0,8 x 515	Edelstahl, Führungsschienen aus Polyamid	ca. 1.800 g	30 kg	Big-Star - V 1896-07 Maxi 1 - V 1852-01 Maxi 2 - V 1853-01 Big-Star Protect - V 1926-07 Big-Star Black - V 1939-07	V 1860-03	238,96 €



SICCO Zubehör für Handschuhboxen


Artikelbeschreibung:	Größe	Material / Besonderheiten:	Gewicht:	passend für:	Artikel-Nr.:	*Richtpreise Euro
Schutzwanne	Fassungsvermögen: 10 Liter bei ca. 20 mm Höhe	Edelstahl verschweißt, als zusätzlicher Schutz des Bodens im Arbeitsraum der Handschuhbox	3500 g	Handschuhbox	V 1971-07	337,47 €
Handschuhe aus Naturkautschuk, beidseitig tragbar, zug-, perforations- und abriebfest, hohe Flexibilität, niedriger Spannungswert, geringe statische Aufladung	Größe 7 Größe 8 Größe 9 geeignet für Öffnungen von Ø 188 mm, Länge 750 mm			Alle Handschuh-boxen	V 1972-07 V 1972-08 V 1972-09	469,57 € 469,57 € 666,49 €
Handschuhe aus EPDM leitfähig schwarz, beidseitig tragbar, zug-, perforations- und abriebfest, hohe Flexibilität, niedriger Spannungswert, elektrisch leitfähig 105 Ohm	geeignet für Öffnungen von: Ø 188 mm Länge: 800 mm Größe 9,75			Alle Handschuh-boxen	V 1974-09	1.184,80 €



** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

SICCO Zubehör für **Handschuhboxen**

Artikelbeschreibung:	H x in Ø mm:	Lieferumfang:	Material/Besonderheit:	Gewicht:	Artikel-Nr.:	*Richtpreise Euro
Iris-Port-Eingriffe mit Schnurdichtung und geschlitzten Scheiben aus Silikon. Die kreuzförmigen Schlitze der zwei Silikonscheiben sind versetzt montiert, so dass der Innenraum einfach zugänglich ist. Gleichzeitig wird der Eingriff durch die sich überlappenden Segmente bei Nichtgebrauch weitestgehend verschlossen. Iris-Port-Eingriffe können anstelle der Handschuhe an jeder SICCO Handschuhbox montiert werden. Lieferumfang 1 Paar.	40 x Ø 215	1 Paar	Polyethylen, Silikon	385 g	V 1976-07	744,96 €
Verschlussdeckel für Eingriffsöffnung Schutz vor Verunreinigungen (z. B. Staubpartikel in der Umgebungsluft) durch einfaches Aufsetzen auf die Eingriffsöffnung Ihrer SICCO Handschuhbox. Die mitgelieferte Dichtung sorgt lediglich für den sicheren Halt des Deckels auf der Eingriffsöffnung, der Verschluss ist nicht gasdicht.	H 30 x Ø 215	1 Verschlussdeckel und 1 Schnurdichtung	Polyethylen, Silikon	195 g	V 1790-07	190,25 €

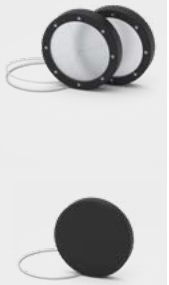

** Richtpreise gültig bis 31.12.2026. Änderungen vorbehalten.*

sicco
Trockenschränke und Exsikkatoren

Der neue Katalog ist online!

NEU



Gleich online durchblättern
oder direkt downloaden unter:
www.sicco.de

SICCO
EINE MARKE DER
BOHLENDER GmbH

Waltersberg 8
D 97947 Grünsfeld
Germany

+49 (0) 93 46-92 86-0
info@sicco.de
www.sicco.de

QR-Code scannen und jetzt
Katalog anfordern oder unter
www.sicco.de/kataloganforderung