

b.safe



NEU

b.safe HPLC-Abfallsammler Justrite®
M 815-01, M 817-01,
M 825-01, M 827-01

Technische Details

b.safe HPLC-Abfallsammler Justrite aus PE-schwarz

Sammlung von **HPLC-Abfällen in Justrite®-Behältern**, Anschlüsse kompatibel mit den standardmäßig vorhandenen Schnellkupplungen aus Polypropylen oder Edelstahl.

b.safe Abluftfilter- Adapter Justrite aus PE-schwarz

Adapter aus **PE-schwarz** zur Verwendung von b.safe Abluftfiltern für sicheres Sammeln von **HPLC-Abfällen in Justrite®-Sicherheitsbehältern** ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe.

C
M 815-01

A
M 825-01



b.safe Abluftfilter- Adapter Justrite aus PE

Adapter aus **PE** zur Verwendung von b.safe Abluftfiltern für sicheres Sammeln von **HPLC-Abfällen in Justrite® Sicherheitsbehältern** ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe.

D
M 817-01

B
M 827-01



b.safe HPLC-Abfall- sammler Justrite aus PE

Sammlung von **HPLC-Abfällen in Justrite®-Behältern**, Anschlüsse kompatibel mit den standardmäßig vorhandenen Schnellkupplungen aus Polypropylen oder Edelstahl.

b.safe HPLC-Abfallsammler Justrite®

Material: **PE-EX, PE** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C to +80 °C** | Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Sammler zur Montage auf den seitlichen Kupplungsanschlüssen von Justrite® Sicherheitsbehältern für HPLC-Abfälle, mit sechs Kapillaranschlüssen für Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4") und sieben Schlauchanschlüssen für Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8"). Fittings für Kapillaren, Schlaucholiven und Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse sind im Lieferumfang

enthalten. Ausführung entweder mit Verteiler und Kupplungsanschluss aus Polypropylen oder Verteiler aus ableitfähigem PE-EX.

Anwendung: Sammlung von HPLC-Abfällen in Justrite®-Behältern, Anschlüsse kompatibel mit den standardmäßig vorhandenen Schnellkupplungen aus Polypropylen oder Edelstahl.

	Material Adapter	Material Kupplung	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	PE-EX	Edelstahl	6 x Ø 1,6 mm (grün) 6 x Ø 2,2 mm (violett) 6 x Ø 3,2 mm (gelb)	6 x milchig weiß (UNF) 7 x weiß (NPT)	2 x 5,5 – 8 mm	M 825-01
B	PP	PP	6 x Ø 1,6 mm (grün) 6 x Ø 2,2 mm (violett) 6 x Ø 3,2 mm (gelb)	6 x milchig weiß (UNF) 7 x weiß (NPT)	2 x 5,5 – 8 mm	M 827-01



b.safe Abluftfilter-Adapter Justrite®

Material: **PTFE, PE** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C to +80 °C** | Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Adapter zur Montage auf den seitlichen Kupplungsanschlüssen von Justrite® Sicherheitsbehältern für HPLC-Abfälle, mit Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten) zur Belüftung des Abfallbehälters während der Befüllung. Ausführung entweder aus PP-grau für

Kupplungsanschluss aus PP-grau oder aus PE-schwarz für Kupplungsanschluss aus Edelstahl.

Anwendung: Adapter zur Verwendung von b.safe Abluftfiltern für sicheres Sammeln von HPLC-Abfällen in Justrite®-Sicherheitsbehältern ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe.

	Material Adapter	Material Kupplung	Artikelnummer
C	PE-schwarz	Edelstahl	M 815-01
D	PP	PP	M 817-01




Optimale Erweiterung: Justite® mit Füllstandsüberwachung

b.safe Scheibensensor

Der Scheibensensor gewährleistet eine zuverlässige Füllstandskontrolle. Befestigen Sie ihn einfach außen am Behälter in der gewünschten Höhe – wenn der Füllstand erreicht ist, wird eine Meldung an das Mini-Display-Table gesendet.

Produkt	Artikelnummer
A b.safe Abluftfilter	M 506-01, -02, -03
B b.safe Abluftfilter-Adapter Justrite®	M 815-01, M 817-01
C b.safe Scheibensensor	R 640-05
D b.safe Signalkabel	R 645-02
E b.safe Mini-Display Table	R 659-01
F b.safe HPLC-Abfallsammler Justrite®	M 825-01, M 827-01

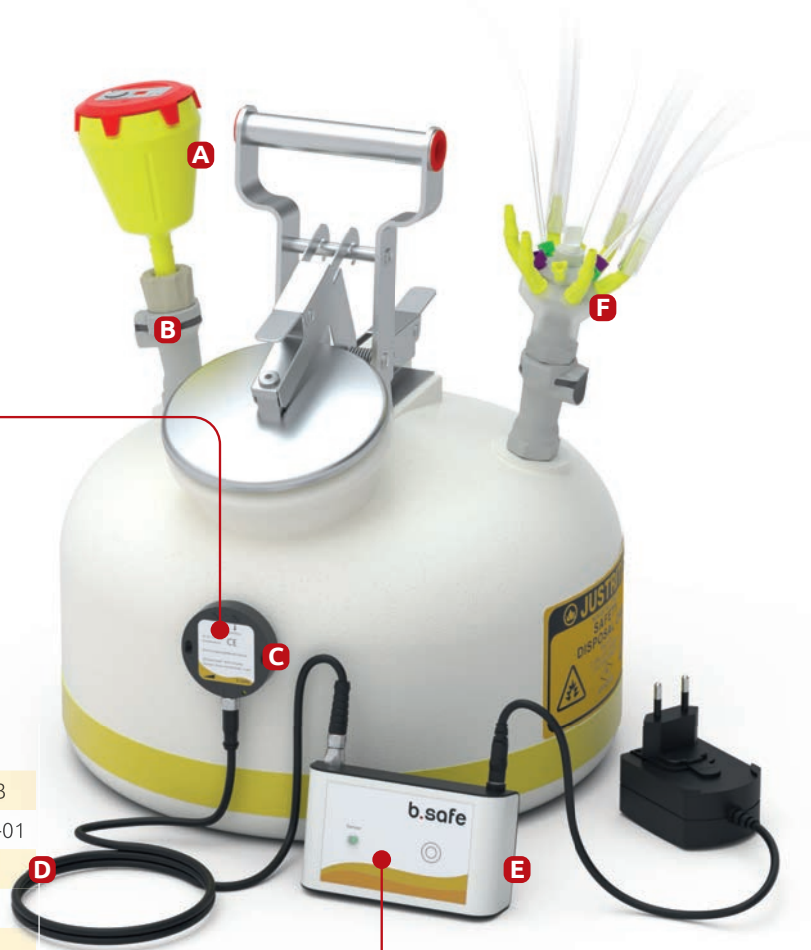

b.safe Mini-Display Table

Bei Erreichen des gewünschten Füllstands blinkt die rote LED am Mini-Display und es ertönt ein Signalton

Jetzt kostenlosen b.safe Katalog anfordern!

Entdecken Sie unser komplettes Produktsortiment, wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im HPLC-Labor und praktische Hilfestellungen zur Auswahl der passenden Lösungen für Ihre Anforderungen.

QR-Code scannen und jetzt
Katalog anfordern oder unter
www.bsafede.de/Kataloganforderung

