

b.safe

Mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit

b.safe Waste Cap
GPI38/430
M 339-03

NEU

GPI38/430

b.safe Waste Cap S40
M 340-01/-03

S40



Mehr Flexibilität für Ihre HPLC-Abfälle.

Eine Flasche – zwei Möglichkeiten.

Warum neue Abfallbehälter verwenden, wenn vorhandene Eluentenflaschen weitergenutzt werden können? Mit der b.safe Waste Cap GPI38/430 oder b.safe Waste Cap S40 verwandeln Sie leere Eluentenflaschen im Handumdrehen in sichere Abfallbehälter für Ihre HPLC-Anwendung.

Die praktische Lösung sorgt für einen effizienten Laborworkflow – ganz ohne komplizierte Umrüstung. Einfach aufschrauben, anschließen und weiterverwenden.



Nutzen Sie jetzt Ihre **leeren GPI38/430 Eluentenflaschen** als Abfallbehälter!


Die **b.safe Waste Caps GPI38/430** machen es möglich!

bsafe.de

+49 (0) 93 46 92 86-0

Nutzen Sie jetzt Ihre
leeren S40 Eluentenflaschen
als Abfallbehälter!

Die **b.safe Waste Caps S40**
machen es möglich!

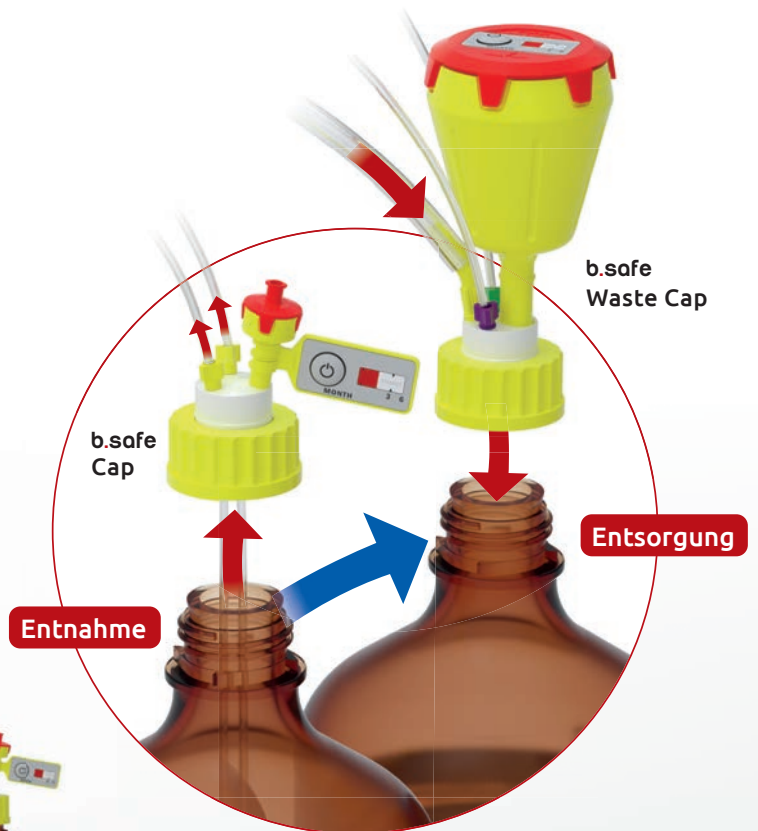

b.safe Waste Caps

Material: **PTFE, PP, PP-GF** | Temperaturbeständigkeit: **0 °C bis +110 °C** | Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut**

Schraubkappe aus PP/PP-GF für Gewinde GPI38/430 oder S40 (je nach Ausführung), frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8,0 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten).

Anwendung: Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach

in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5-8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren.

	Anzahl Kapillaranschlüsse	Gewinde	Anzahl Fittings	Anzahl Blindfittings	Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø	Artikelnummer
A	2	GPI38/430	2 x Ø 1,6 mm (grün) 2 x Ø 2,2 mm (violett) 2 x Ø 3,2 mm (gelb)	1 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 – 8 mm	M 339-03
B	3	S40	3 x Ø 1,6 mm (grün) 3 x Ø 2,2 mm (violett) 3 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 (milchig-weiß)	0	M 340-01
C	2	S40	2 x Ø 1,6 mm (grün) 2 x Ø 2,2 mm (violett) 2 x Ø 3,2 mm (gelb)	2 (milchig-weiß)	1 x Ø 5,5 – 8 mm	M 340-03

Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.



Unsere b.safe Caps finden Sie hier:



Jetzt kostenlosen b.safe Katalog anfordern!

Entdecken Sie unser komplettes Produktsortiment, wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im HPLC-Labor und praktische Hilfestellungen zur Auswahl der passenden Lösungen für Ihre Anforderungen.

QR-Code scannen und jetzt Katalog anfordern oder unter www.bsafe.de/Kataloganforderung

