



Trockenschränke und Exsikkatoren




SICCO Control-Exsikkatoren Für eine konstante und kontrollierte Luftfeuchtigkeit

stabil | funktionell | individuell

NEU

Intelligente Feuchteregelung – Vollautomatisch

Unsere Control-Exsikkatoren nutzen eine innovative Methode, um die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft auf einen Sollwert von 15 % bis 95 % zu regeln. Die automatische Control-Einheit entzieht dem Innenraum Feuchtigkeit oder fügt diese bei Bedarf hinzu.

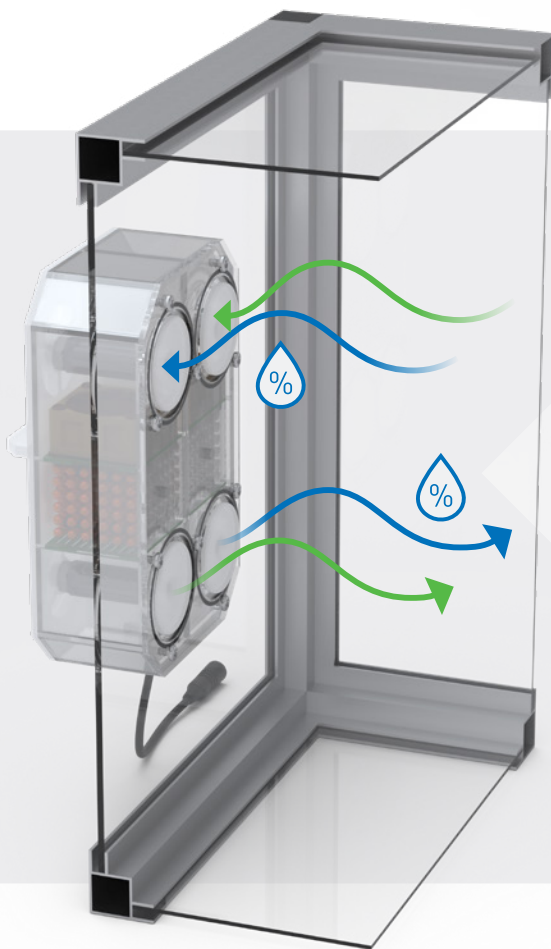

Und so funktioniert es:

Spezielle Trockenperlen (Silicagel) absorbieren Feuchtigkeit aus dem Innenraum und geben sie an die Umgebung ab.

Beziehungsweise werden die Perlen genutzt, um Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft in den Innenraum zu leiten.

Ein kleiner Lüfter und die Erwärmung der Perlen unterstützen den Prozess.

Die kompakte Control-Einheit

auf der Rückseite ist das Herzstück des Systems und regelt den gesamten Feuchtigkeitsprozess vollautomatisch.





Das Touch-Display – Alles auf einen Blick

Das digitale Display ist Ihre Kommandozentrale. Hier stellen Sie den gewünschten Sollwert (von 15 % bis 95 % r.F.) einfach ein. Sie haben jederzeit den aktuellen Ist-Wert sowie die Temperatur auf einen Blick und können den Betriebsstatus sofort erkennen.



Wir beschleunigen den Trocknungsprozess?

Vergessen Sie aufwendige Installationen. Unsere Control-Exsikkatoren arbeiten ohne Wasseranschluss und manuelle Überwachung. Ein Stromanschluss genügt: Sollwert einstellen und das System regelt vollautomatisch. Perfekter Schutz bei maximalem Komfort.

Drei Größen. Ein Prinzip.

Alle drei Modelle funktionieren nach demselben Control-Prinzip, sind aber für unterschiedliche Größen und Anforderungen ausgelegt. Sie bestehen aus einem stabilen Aluminiumrahmen mit klaren Scheiben aus PMMA (Acrylglas). Die Exsikkatoren sind für den Normaldruck ausgelegt und temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C. (230V/50 Hz benötigt).

Die Modelle im Überblick:



Artikel	Control-Star Exsikkator V 1677-07	Control-Big Star Exsikkator V 1679-07	Control-Maxi 2 Exsikkator V 1682-07
Außenmaße* B x H x T mm	310 x 525 x 375	560 x 560 x 580	560 x 1150 x 580
Überstand Controleinheit mm	60 hinten	60 hinten	60 hinten
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	260 x 480 x 330	495 x 500 x 540	495 x 500 x 540 pro Kammer
Innenvolumen Liter	51	156	156 pro Kammer
Gewicht kg	7,3	23	36
Max. Nutzlast pro Boden / Gesamtlast kg	10 / 30	30 / 80	30 / 80 pro Kammer
Nutzfläche je Zwischenboden mm	245 x 320	479 x 515	479 x 515
Minimaler Abstand der Zwischenböden mm	11,5	39	39
Zusätzliche Zwischenböden inkl. Führungsschienen	V 1860-68	V 1860-03	V 1860-03

Die Control-Vorteile auf einen Blick

- ✓ Entfeuchten & Befeuchten mit nur einem Gerät.
- ✓ Präzise Einstellung der relativen Luftfeuchte von 15% bis 95 %
- ✓ Keine externe Wasserzugabe oder Entleerung nötig.
- ✓ Vollautomatische Regelung dank Control-Einheit.



Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
www.sicco.de oder
+49 (0) 93 46-92 86-0



Jetzt QR-Code scannen und
Katalog downloaden unter:
www.sicco.de/katalog

