

b.safe

Durchdachte Sicherheitslösungen für UHPLC.



Eine Marke von Bohlender

bsafe.de



b.safe Caps UHPLC



bsafe.de

b.safe Caps UHPLC

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz erlaubt sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Artikel	Lieferumfang	Artikelnummer
Cap UHPLC	1 x b.safe Cap 1 x Belüftungsventil 3 x Fitting 3,2 mm 2 x Blindstopfen	M 1045-03



Chemisch hochbeständig

Mit der Kappe aus robustem PPS und dem Einsatz aus chemisch hochbeständigem PTFE ist die b.safe Cap UHPLC sterilisierbar, autoklavierbar und sogar spülmaschinenfest.




Beste Griffbarkeit

Das ergonomische Design und die erodierte Oberfläche der b.safe Cap UHPLC bieten auch behandschuhten Händen in allen Größen festen Halt.

b.safe Belüftungsventile UHPLC



bsafe.de

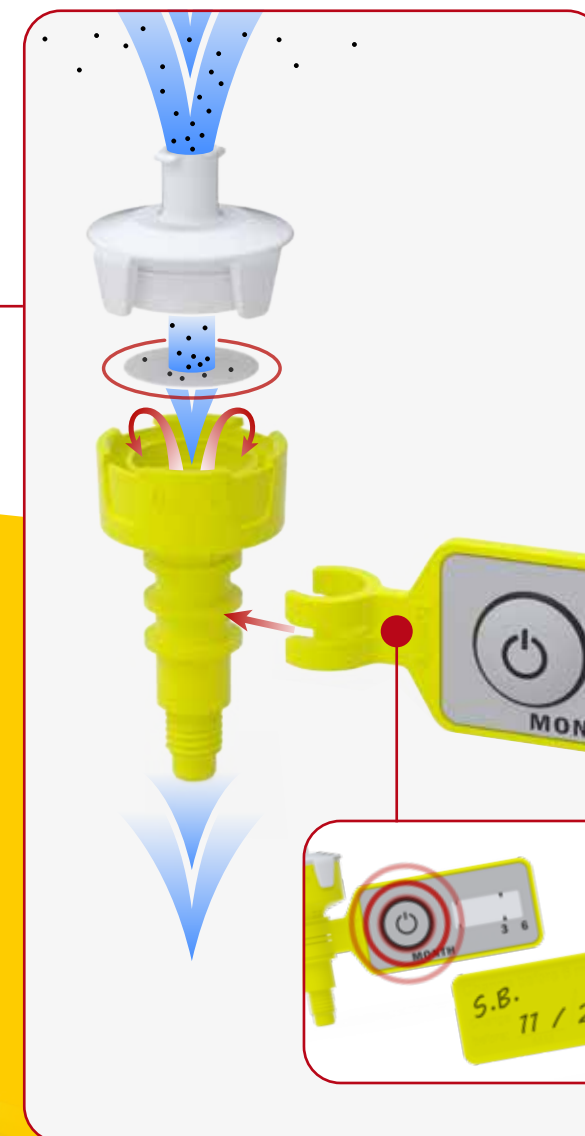

b.safe b.safe Belüftungsventile UHPLC

Die vorgeschaltete Membran mit einer Porengröße von 0,1 µm aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Grob- und Feinstaub, sowie von diesem getragene Mikroorganismen und andere Verunreinigungen von außen zurück.

Artikel	Lieferumfang	Artikelnummer
Belüftungsventil UHPLC	2 x Air Valve	M 551-01

- PTFE-Filtermembrane (Porenweite 0,1µm)
- Kein Durchkommen für Mikroorganismen
- Kein Algen- und Biofilmwachstum
- Kein Verschluss von Kapillaren und Filterfritten
- Keine Stillstandzeiten, keine Instandsetzungskosten



Wo kann ich mich noch informieren?

bsafe.de
+49 (0) 9346 9286-0
info@bohlender.de



Folgen Sie Uns